

Optimisez votre lecture en imagerie mammaire

Poste de travail d'imagerie mammaire SecurView®



Conçues pour les radiologues spécialisés dans l'interprétation de l'imagerie mammaire, les stations de travail SecurView proposent des flux de lecture avancés et personnalisables, ainsi que des outils innovants de manipulation d'images, afin de favoriser une évaluation précise et efficace des examens de mammographie 3D™ et d'échographie mammaire.¹

Simplification du flux de travail pour une lecture personnalisable et efficace

Diagnostic rapide et éclairé



Prise de décision rapide grâce à la disponibilité immédiate, pour revue et diagnostic, de toutes les études pertinentes de mammographie et d'échographie mammaire, y compris les examens antérieurs.

Accès rapide aux outils



Clavier de flux de travail dédié SecurView, comprenant des touches de raccourci et une barre de défilement, permettant un accès rapide aux outils d'interprétation couramment utilisés.

Solution de synchronisation du flux de travail



Le logiciel Application Synchronisation* optimise le flux de travail et réduit les erreurs et le nombre de clics grâce à la synchronisation des systèmes EMR, RIS et de compte rendu couramment utilisés.

Solutions d'imagerie optimisées




La solution assure une intégration fluide et des performances optimales avec les technologies d'imagerie les plus récentes de Hologic, telles que 3DQuorum® SmartSlices et la technologie de détection Genius AI™.

Améliorez la productivité de lecture avec des outils adaptés

Outils dédiés à l'interprétation de l'imagerie mammaire

Tirez parti d'outils efficaces et personnalisables pour accélérer l'interprétation diagnostique en imagerie mammaire :

- Vitesses ciné définies par l'utilisateur en fonction du type d'étude (coupes de 1 mm, SmartSlices de 6 mm, multi-images échographiques).
- Fonction Right-size qui met à l'échelle les images issues de différentes études afin de faciliter leur comparaison.
- Smart Mapping pour les images 2D synthétique Intelligent 2D™ ou C-View™ et les coupes de tomosynthèse.
- Affichage des repères CAD avec la licence du logiciel Genius AI™ Detection* :
 - Trois repères différenciés pour l'affichage CAD (repères calc, mass, malc)
 - Affichage RightOn™ et PeerView™ pour améliorer l'analyse
- Outils supplémentaires de priorisation des cas et de flux de travail, en association avec Genius AI™ Detection*
- Revue des échographies mammaires :
 - Outils logiciels et clavier de défilement pour les séries d'images couleur et multi-images
 - Revue des images d'échographie mammaire de tous les fournisseurs
- Prise en charge des protocoles d'affichage multimodalités
- Affichage d'images multi-fournisseurs
- Données d'image stockées localement sur la station de travail, permettant un affichage rapide des images

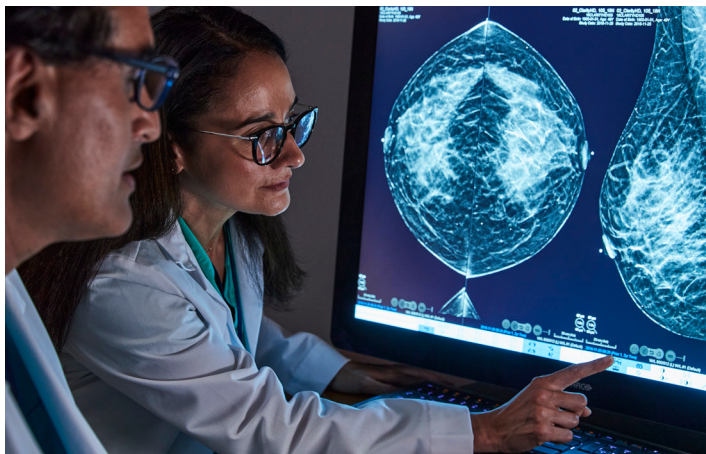

Affichage optimisé des images avec les différentes configurations SecurView



	Nio Colour 5.8MP	Gemini 12MP	Coronis OneLook
Fabricant	Barco	Double Black Imaging	Barco
Taille de l'écran	21.3", double écran	31", écran unique	33", écran unique
Traitement antireflet	Antireflet	Antireflet	Verre optique antireflet avec revêtement anti-traces
Temps de transition gris à gris	12.5 ms (en moyenne)	14ms (mode Off); 5ms (mode Fast)	6 ms (en moyenne)
Résolution	5.8MP	12MP	32MP
Profondeur de couleur	10-bit	10-bit	30-bit

Découvrez les options permettant d'optimiser le flux de travail et de réduire la complexité du poste de travail*

Synchronisation patient pour réduire le risque d'erreurs

Le logiciel de synchronisation des applications assure la synchronisation du patient ainsi qu'une connexion et une déconnexion unifiées avec plus de 60 systèmes RIS, de compte rendu et de dictée.

- Simplifie le flux de travail en supprimant les saisies manuelles et les clics inutiles.
- Garantit l'affichage du même patient dans l'ensemble des applications, contribuant ainsi à réduire le risque d'erreurs de lecture et de compte rendu.
- Automatise le flux de travail entre plusieurs applications afin de fiabiliser et de simplifier l'ouverture et la fermeture des dossiers patients.

Affichage multimodalités*

Étendez les capacités de la station de travail SecurView® grâce à des fonctionnalités avancées de multimodalités, permettant l'affichage de l'IRM mammaire aux côtés des images de mammographie et d'échographie mammaire

- Complète l'environnement d'imagerie mammaire grâce à des outils de réception, d'affichage et de manipulation des images multimodales.
- Facilite la lecture simultanée de plusieurs modalités d'imagerie mammaire.
- Synchronise les images de mammographie, d'échographie mammaire et d'IRM mammaire afin que les examens du même patient s'affichent automatiquement à l'ouverture du dossier.
- Permet de créer des protocoles de présentation dédiés à l'échographie et à l'IRM dans un environnement multimodal.

Routage et archivage des images

Préchargez les examens antérieurs pour un accès immédiat, gérez efficacement la distribution des images et réduisez la charge sur les réseaux grâce aux systèmes SecurXchange® Archive et Router systems.*†

- Les solutions SecurXchange Archive+ offrent une approche efficace et évolutive pour répondre aux exigences spécifiques d'archivage de la mammographie et des données d'imagerie multimodales.
- Le système SecurXchange Router+ répond aux besoins complexes des flux de travail, notamment grâce au préchargement des examens antérieurs et au routage intelligent des objets DICOM.
- Une option HL7 permet le préchargement des examens antérieurs la veille de l'examen lorsqu'une communication avancée avec le RIS ou le dossier médical informatisé est requise.

Options de communication avancées

Des protocoles de communication avancés entre les stations de travail SecurView® DX et SecurView RT, ainsi qu'avec les systèmes Dimensions®, permettent le partage d'annotations, de commentaires et d'instructions entre radiologues et manipulateurs.



Les solutions SecurView DX et RT Managers facilitent la communication au sein d'un cluster de stations de travail afin d'améliorer l'efficacité. Les modules Manager permettent un accès instantané aux images ainsi que le partage des repères et annotations sur l'ensemble des stations de travail SecurView. Une distribution avancée des images peut être activée afin d'améliorer le débit d'examen et la disponibilité des images à l'échelle du système d'information de l'établissement.

Les DX Managers permettent un accès fluide aux stations de travail SVDX situées à distance, à domicile ou sur des sites satellites.

Les stations de travail SecurView RT rationalisent les processus grâce à des fonctions avancées de communication et d'optimisation du flux de travail, contribuant à augmenter la capacité de prise en charge des patientes. La station de travail RT répond aux besoins des centres d'imagerie mammaire à forte activité en assurant une communication électronique bidirectionnelle entre le manipulateur et le radiologue. Le manipulateur a accès aux annotations, commentaires et instructions pour l'ensemble des systèmes Hologic de mammographie 3D™.

La licence Dimensions Notices permet la communication entre le manipulateur au niveau de l'AWS et le radiologue sur la station de travail SecurView.



* Achat en option

* Ce produit peut ne pas être commercialisé dans votre région ; veuillez contacter votre représentant commercial.

References: 1. SecurView Workstation user guide AW-32404-002 Rev 002.

Distribué par :  **STEPHANIX**
MEDICAL IMAGING SOLUTIONS

CE 0050 EC REP Emurgo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands – SecurXchange
2797 EC REP Hologic BV, Da Vincilaan 5, 1930 Zaventem, Belgium. NB Number wherever applicable

Santé mammaire et osseuse | Hologic.fr | france@hologic.com

Usage prévu de la Station de diagnostic SecurView DX : La console DX de Hologic est conçue pour la sélection, l'affichage, la manipulation et l'échange films/média d'images multimodalité en provenance de divers systèmes d'imagerie. Elle fournit aussi des interfaces avec divers appareils de stockage et d'impression utilisant DICOM ou d'autres standards d'interface similaires. En conjonction avec des écrans agréés par la FDA l'appareil peut être utilisé par un médecin qualifié pour afficher, manipuler et interpréter des images mammographiques non-compressées ou compressées sans perte, dans un cadre de mammographie de diagnostic ou de dépistage et de tomosynthèse numérique du sein, tout comme toute autre image de multimodalité DICOM. SecurView DX est généralement utilisé par des professionnels y compris, mais sans s'y limiter, les médecins, les radiologues, les infirmières, les manipulateurs et les assistants médicaux.

Usage prévu de la Station des manipulateurs SecurView RT : La station des manipulateurs SecurView RT est une console d'affichage destinée uniquement la visualisation et elle pas en charge la lecture de la mammographie de diagnostic. Elle est capable de récupérer pour affichage des images antérieures de mammographie en provenance de PACS ou d'autres systèmes de stockage d'images DICOM. Dispositif médical de Classe IIa. Lire attentivement les instructions figurant dans le manuel d'utilisation.

SS-00529-EUR-FR Rev 002 © Hologic Inc. 2026 Tous droits réservés. Hologic, 3D, 3D Mammography, 3DQuorum, C-View, Genius AI Detection, Intelligent 2D, MultiView, PeerView, RightOn, SecurView, SecurXchange, The Science of Sure et les logos associés sont des marques commerciales ou des marques déposées de Hologic, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales, marques déposées et noms de produits sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Ces informations sont destinées aux professionnels de santé et ne constituent en aucun cas une sollicitation ou une promotion de produits dans les pays où de telles activités sont interdites. Les documents Hologic étant diffusés via des sites Web, des diffusions électroniques et des salons professionnels, il n'est pas toujours possible de contrôler leur lieu de publication. Pour obtenir des informations sur les produits spécifiques disponibles à la vente dans un pays donné, veuillez contacter votre représentant Hologic ou écrire à france@hologic.com.