



STEPHANIX

MEDICAL IMAGING SOLUTIONS

— CATALOGUE —



STEPHANIX

Une équipe de plus de 200 collaborateurs à vos côtés.



STEPHANIX est une PME industrielle française de référence, spécialisée depuis plus de 40 ans dans le domaine de l'imagerie médicale.

Fabricant français de **tables de radiologie**, nous maîtrisons l'ensemble de la chaîne de valeur, de la conception au développement jusqu'à la fabrication, la commercialisation, l'installation et le service après-vente.

Nous répondons aux différents besoins des unités de **radiologie** des hôpitaux, cliniques et cabinets privés grâce à une gamme complète de solutions en radiologie numérique : salles télécommandées, salles os-poumons, mobiles de radiographie, arceaux chirurgicaux, mammographes, ostéodensitomètres, panoramiques dentaires, et bien plus encore.

Depuis plus de 10 ans, l'ensemble de nos tables de radiologie a obtenu la certification **Origine France Garantie**. Cette certification, reconnue, soumise à un audit annuel, et bien plus exigeante que le simple marquage douanier « Made In France », vous garantit que nos tables de radiologie prennent leurs caractéristiques essentielles en France.

Nous sommes à ce jour la première et la seule entreprise de notre secteur à avoir obtenu cette certification pour des tables de radiologie.

L'**Europe** est également à l'honneur au sein de notre gamme avec nos salles os-poumons, générateurs, mobiles de radiologie, arceaux chirurgicaux et panoramiques dentaires, majoritairement fabriqués en UE.

Grâce à notre savoir-faire, nous avons su conquérir le marché français de la radiologie et poursuivre notre développement bien au-delà. Nos systèmes sont marqués CE et sont enregistrés pour la plupart auprès de la FDA, de Santé Canada, de la SFDA, ce qui permet de retrouver nos produits dans plus de 100 pays et de réaliser 30% de nos ventes à l'**international**. STEPHANIX participe également au rayonnement de l'imagerie médicale française à l'international au travers de **French Healthcare Association**.

Au début des années 2000, nous avons initié d'importants partenariats avec des constructeurs incontournables comme :

- **Hologic**, leader mondial sur le marché de l'imagerie de la femme, qui assure à Stephanix une présence forte sur les marchés de l'ostéodensitométrie et de la mammographie numérique. Fidèle à sa signature « Science of Sure », Hologic développe des technologies de pointe rigoureusement validées sur le plan clinique, contribuant ainsi à faire progresser le dépistage et le diagnostic au service des patientes.

- **Canon Medical Systems** avec une large gamme de capteurs plans numériques.

- **Thales**, avec des solutions à capteurs plans et son expertise en cybersécurité avec une solution de supervision et de maintenance à distance.

- **Planmeca**, avec une gamme complète de panoramiques dentaires et de systèmes cone beam, pour les explorations dentaires, maxillo-faciales et articulaires.

Plus de 20 ans après, ces mêmes partenariats perdurent ; gage d'expertise, de continuité de service et tout simplement, de stabilité.

Parmi nos 200 collaborateurs, plus de 100 techniciens sont répartis sur l'ensemble du territoire français, afin d'assurer un service réactif de proximité tout au long de la vie des équipements de nos clients. Cette organisation territoriale solide est reconnue par la certification **Service France Garanti**, qui atteste que notre service après-vente et notre accompagnement technique sont intégralement opérés depuis la France, avec des équipes locales dédiées et formées aux besoins de nos clients.

STEPHANIX : des femmes et des hommes qui oeuvrent pour imaginer et concevoir, ensemble, les solutions d'imagerie médicale de demain.



ACCOMPAGNEMENT

Notre force de vente : un soutien permanent pour vous. Des professionnels de l'imagerie médicale avec une vision globale, à votre écoute, pour vous proposer des solutions et vous accompagner dans vos projets.



FINANCEMENT

Un accompagnement personnalisé afin de vous proposer un financement clair et respectueux de vos exigences et de vos besoins.



FORMATION

Notre service application clinique vous accompagne de la prise en main à l'expertise de votre système et vous propose des formations complémentaires en fonction de vos besoins.



SERVICE CLIENT

Une couverture nationale avec des effectifs formés aux dernières technologies. Plus de 100 techniciens experts, engagés dans une démarche Service France Garanti, avec pour priorité de minimiser les arrêts d'exploitation et d'accompagner les équipements sur toute leur durée de vie.

— CATALOGUE —

— SOLUTIONS EN RADIOLOGIE —



De la table télécommandée à la salle os-poumons, jusqu'au mobile de graphie, STEPHANIX démontre son savoir-faire et innove par l'application de nouveaux procédés : l'intégration de capteurs plans dans sa gamme en est un exemple réel et un succès avéré.

L'innovation est notre moteur, STEPHANIX fut la première société à mettre sur le marché une table télécommandée avec un capteur plan*.

La maîtrise de la recherche et du développement, des procédures de fabrication et son engagement au service de la qualité permettent à tous les praticiens de bénéficier de niveaux de technologies et de performances adaptés à leurs exigences.

STEPHANIX propose une large gamme de détecteurs numériques (DR), qui répond aux besoins de la radiologie générale. Outre les capteurs plein champ intégrés, les systèmes portables apportent des solutions DR partout où elles sont nécessaires, telles que les applications en traumatologie et au lit du patient.

La diversité des capteurs plans laisse imaginer une multitude de solutions pour répondre à toutes les attentes du service : configurations à détecteur unique intégré ou amovible, configurations à deux, trois ou quatre détecteurs avec la possibilité de combiner tous les modèles.

* installation de la première salle télécommandée STEPHANIX avec un capteur plan intégré en septembre 2001

D²RS 90/90



Le fruit de l'expérience.

D²RS 90/90 conserve les qualités reconnues de D²RS comme la console de commandes capacitives, l'autopositionnement complet et personnalisable, la charge maximale de 230 kg sans restriction, l'incidence de colonne alliée aux mouvements du plateau qui offrent une couverture sous X de 2,25m et le réel accès patient.

A ces caractéristiques, D²RS 90/90 optimise son accessibilité avec un basculement de +/-90° et une hauteur variable remarquable de 38 à 148 cm pour un accès inégalé.



D²RS

Toute l'expertise de STEPHANIX.

Chaque protocole anatomique pilote l'automatisation des positionnements de la table, de la collimation, des filtres, des paramètres d'acquisition et des post-traitements.

Les déplacements latéraux et longitudinaux alliés à l'angulation de la colonne (+/- 40°) permettent une couverture complète du plateau sous rayons X, ainsi qu'un accès arrière dégagé.

Pour le positionnement des patients difficiles, D²RS ne présente aucune limitation de mouvements jusqu'à 230 kg, et peut supporter jusqu'à 310 kg en position horizontale.

STEPHANIX a repensé son pupitre de commande. Un nouveau design, de nouveaux matériaux, de nouvelles technologies, tous ces éléments pour rendre nos produits toujours plus actuels.



Xtreme

Xtreme, une personnalisation sur mesure.

Les configurations sont personnalisables selon vos attentes : radiologie générale, traumatologie, salle d'urgences, pédiatrie, applications spécifiques.

Xtreme, analogique ou numérique, est composée d'une suspension plafonnière, d'un Potter vertical ou basculant, et d'une table élévatrice fixe ou mobile. Elle existe en version manuelle ou asservie.

La combinaison de récepteurs d'images fixes et portables dans une même salle multiplie les possibilités de procédures pour couvrir les examens en routine clinique.




Xtreme Premium

Une salle de radiologie d'urgence : un système tout numérique, tout automatique, tout motorisé.

Avec l'autopositionnement, la nouvelle salle de radiologie polyvalente Xtreme Premium est équipée d'une suspension plafonnière, d'une table élévatrice à panneau flottant et d'un potter mural. Elle est numérisée par la technologie à capteur plan - fixe ou portable. Chaque protocole anatomique personnalisable pilote l'automatisation des positionnements des statifs, de la collimation, des filtres, des paramètres d'acquisition et des post-traitements.

Fluidité, facilité de mouvements et technicité résument les caractéristiques de ce nouveau système de radiographie au service de vos patients.

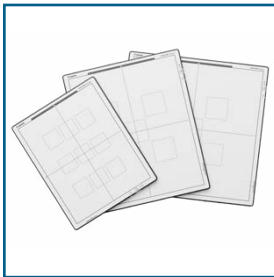




Statif Pro

Cet équipement se compose d'une colonne sur laquelle coulisse verticalement un bras en C rotatif, dont l'une des extrémités est équipée d'un support récepteur d'images et l'autre extrémité d'un tube radiogène.

Il convient à tous les types d'examens sur patient debout, assis dans un fauteuil roulant ou allongé sur une table mobile. Cette conception de bras en C autorise des clichés de profil. Grâce aux fonctionnalités automatiques de positionnements, Statif Pro est une véritable salle d'os télécommandée. L'écran tactile permet de visualiser la position attendue du patient et les paramètres du système et du générateur.

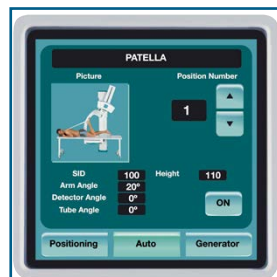


Statif Stum

Ce statif permet d'effectuer des radiographies en position horizontale, verticale ou oblique ; il est souvent dédié aux examens pulmonaires et d'extrémités.

Polyvalent, il est adapté aux salles de dimensions réduites.


Une version à focale fixe type BRS (spécifications définies par l'OMS) est disponible dans la gamme STEPHANIX.

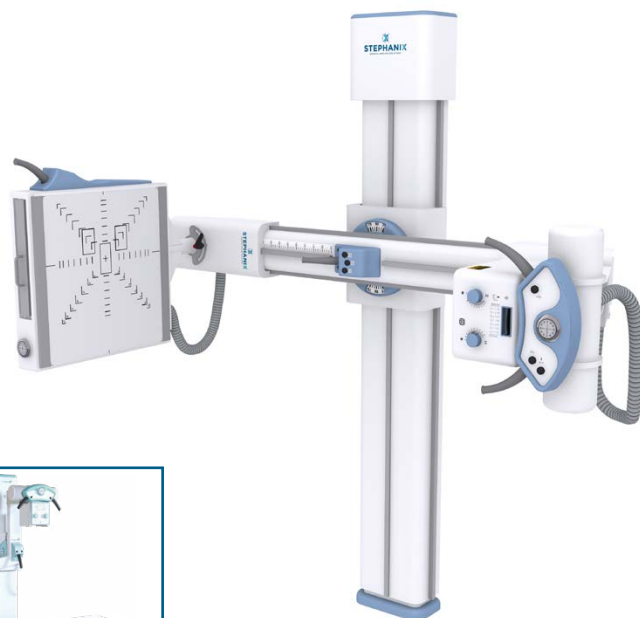

Rad Series

Composée d'une colonne tout-au-sol, RAD Series vous offre les mêmes perspectives que la salle d'os à suspension :

- combinaisons de statifs,
- possibilités d'imagerie ostéo-articulaire et pulmonaire,
- versions conventionnelles ou numériques.

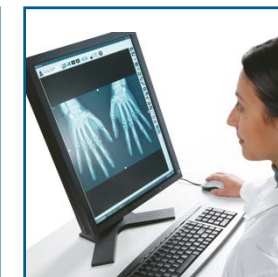

Nomad DReam

Solution de numérisation nomade :

Afin de numériser vos salles et mobiles analogiques, la console d'acquisition portable est associée à un capteur plan Wi-Fi (plusieurs modèles et formats compatibles) utilisant le mode de détection automatique d'exposition. L'interface utilisateur tactile permet de travailler par régions anatomiques avec des post-traitements dédiés et ajustables, avant d'envoyer l'image sur le réseau.



MOVIX DReamy



Entrez dans la nouvelle génération des mobiles STEPHANIX : l'innovation concentrée dans un mobile motorisé plus compact, en gardant le meilleur de ses prédécesseurs. Il offre une plus grande flexibilité et ergonomie d'utilisation. Sa technologie a été pensée pour garantir fiabilité, puissance, image de haute définition, convivialité de l'interface, maniabilité et visibilité optimale. Ces systèmes sont conçus pour la radiographie au lit des patients, mais également pour l'imagerie en unités de soins intensifs, d'urgences, de radio-pédiatrie.



MOVIX 4/8 E+

D'un poids inférieur à 100 kg, de petit gabarit (72 x 67 x 141 cm plié), ce mobile à générateur monobloc s'utilise en milieu hospitalier pour les clichés au lit du patient, ou sur le terrain pour les examens en ambulatoire par exemple lors d'événements humanitaires ou sportifs.

Les capteurs plans des versions de mobiles DR sont mutualisables sur toutes les salles numériques STEPHANIX.



MOVIX PMC

MOVIX PMC, le mobile de radiologie alliant Puissance, Maniabilité et Compacité.

Grâce à sa batterie intégrée, il permet de réaliser des examens directement au chevet du patient, sans raccordement secteur.

Une solution performante pour des examens rapides, précis et fiables.




INCEPTO INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Les solutions INCEPTO par STEPHANIX : Votre « couteau suisse » de l'IA en radiologie. Un modèle évolutif qui permet d'intégrer d'autres solutions d'IA en fonction de vos besoins, d'en changer, en toute simplicité.

STEPHANIX couvre l'ensemble des besoins en radiologie conventionnelle et propose un ensemble de solutions d'IA pour couvrir les besoins :

- Aide au diagnostic pour les radios du thorax (urgences)
- Détection des fractures (traumatologie)
- Radio de la jambe avec mesure automatique en orthopédie
- Radio du bassin : mesure automatique des radiographies du bassin ou de la hanche en position debout
- Âge osseux (pédiatrie)
- Pneumologie : emphysème et scissures pulmonaires

Bien plus encore, nous vous proposons des solutions en IRM (SEP, Neuro), en scanner (détection et analyse de nodules pulmonaires), et scanner aortique. Choisissez à la carte la ou les solutions qui feront de l'IA votre allié dans une pratique quotidienne.

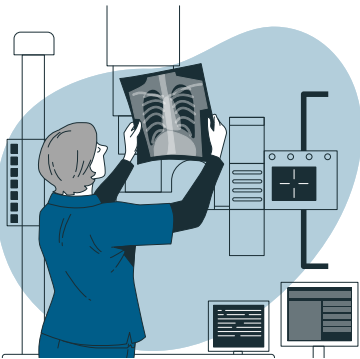

— IMAGERIE DE LA FEMME —



Une détection précoce du cancer du sein, c'est essentiel et la raison d'être des solutions Hologic qui vous proposent la tomosynthèse mammaire, des solutions de biopsie et un ensemble d'imagerie dynamique et de quantification.

L'ostéodensitométrie, c'est bien plus qu'une densité osseuse. Utilisez des outils de mesure comme la VFA, le FRAX, le TBS et bien plus encore avec les outils sur l'analyse corporelle, la graisse viscérale, le tout dans une seule et même plateforme évolutive en fonction de vos besoins.

Accédez à l'excellence avec la gamme complète des solutions Hologic en Imagerie de la Femme et en interventionnel.





Selenium 3D Performance - Dimensions 6000


Selenium 3D Performance : Offrez à vos patientes l'excellence de la tomosynthèse Hologic. Profitez de C-View™, l'image 2D intelligente générée par IA à partir des acquisitions de tomosynthèse, pour un workflow optimisé et une dose maîtrisée. La solution idéale pour les centres de dépistage, exigeant performance, efficacité et confiance clinique. Avec le Selenium Dimensions 6000, vous faites le choix de l'excellence en diagnostic : tomosynthèse, imagerie 2D reconstruite, biopsie stéréo et 3D et biopsie sous angiommammographie, densité mammaire, IA et plus encore.

Découvrez notre portfolio de solutions en IA et nos consommables de biopsie.



3Dimensions


3Dimensions™ : la tomosynthèse réinventée : ouvrir le champ des possibles. Accédez à la haute résolution sans compromis. Offrez plus de confort avec notre technologie SmartCurve™, une ergonomie repensée, des performances cliniques sans égales en particulier avec Intelligent 2D, l'imagerie 2D reconstruite basée sur le deep learning. Sans comparaison en interventionnel pour la biopsie stéréo et sous tomosynthèse. Progressez dans le diagnostic avec nos solutions en densité mammaire, angiommammographie. 3D Quorum™: une technologie d'IA permettant de réduire le temps de lecture de 54%, réduire le nombre de coupes à lire de 66%, réduire la volumétrie de 50%.

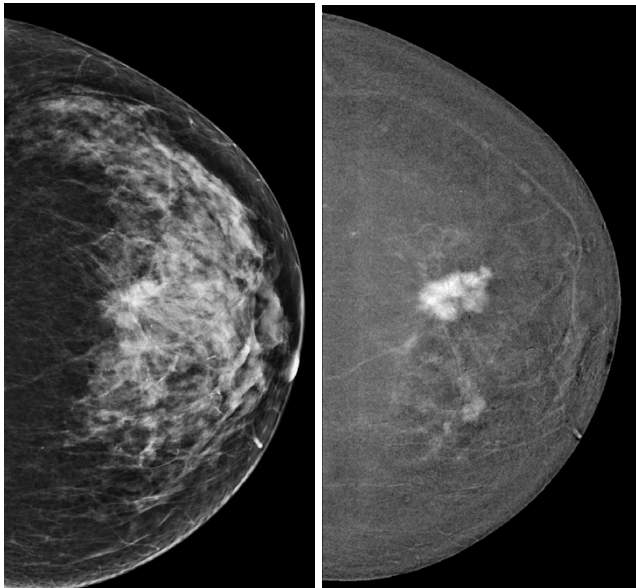

I-View™ 2.0

I-View™ 2.0 : votre solution en angiommammographie. Réalisez en moins de 8 minutes une angiommammographie 2D et/ou une tomosynthèse couplée à l'angiommammographie. Apportez une réponse clinique claire pour les patientes non compatibles à un examen IRM, ou pour répondre à une interrogation clinique complexe ou évaluer la réponse à une chimio néo-adjuvante.

Réalisez facilement et très rapidement un geste interventionnel avec l'option de biopsie sous angiommammographie. Une procédure plus simple que la biopsie sous IRM, offrant un meilleur confort et plus grande ergonomie.

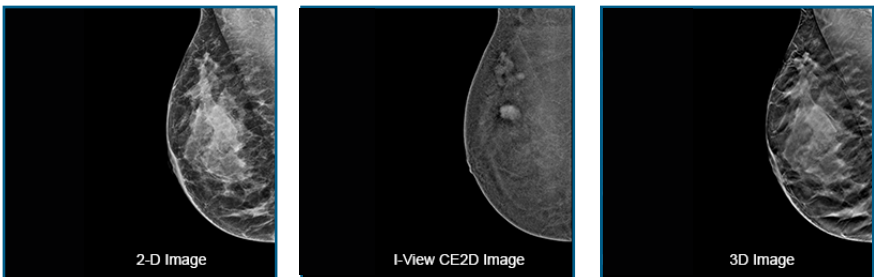

GAID 2.0

Genius IA 3D Detection: notre solution d'IA d'aide au diagnostic. Basée sur le deep learning, cette solution logicielle totalement intégrée dans la console d'acquisition offre des résultats précis et très rapide. Pas de serveur externe et un workflow optimal: l'opérateur reçoit une indication directement sur la console permettant un suivi personnalisé. Le radiologue obtient les résultats en moins de 1 minute avec des zones d'intérêts clairement délimitées sur l'image 2D ou 2D synthétique, une sélection automatique des coupes de tomosynthèse où se situe la/les lésion(s) et un score de cas fournissant un indicateur complémentaire pour l'évaluation de la suspicion de malignité.

Genius IA 3D Detection : c'est votre assistant, une seconde paire d'œil pour vous aider dans votre diagnostic.





Kit Affirm

Le kit de biopsie Affirm™ pour le Selenia Dimensions s'installe en moins d'une minute, et permet de biopsier en 2D ou en tomosynthèse*, mais également de réaliser une biopsie sous angiommammographie*.

Compatible avec toutes les aiguilles du marché, il affiche un graphique de la cible et de l'aiguille avec les informations sur les marges et positions.

Associé à des palettes radio-transparentes et à son design, le kit Affirm peut effectuer un contrôle radiographique des spécimens aiguille en place, pendant et en fin de procédure.

* en option



Affirm Prone

La table dédiée de biopsie Affirm Prone™ innove avec un capteur plan grand champ, 12x14cm, au sélénium amorphe. Elle permet la biopsie en 2D et sous tomosynthèse*.

Le système détermine la cible pour un abord frontal et latéral et son bras latéral intégré donne la possibilité à l'utilisateur de passer d'un mode à l'autre simplement.

L'accès à la lésion sur 360° et les nombreux coussins permettent de s'adapter aux différentes morphologies des patientes.

* en option



ATEC Sapphire

La console de biopsie mammaire assistée par aspiration ATEC optimise la prise en charge avec une solution tout-en-un, rapide et prête à l'emploi, compatible avec toutes les modalités d'imagerie (échographie, IRM et stéréotaxie). En moins d'une minute, son cycle garantit des prélèvements fiables et performants.

Le système Eviva, dédié aux biopsies stéréotaxiques et 3D, associe précision, contrôle optimal et réduction des hématomes, tout en améliorant le confort patient grâce à l'administration d'anesthésique sans interrompre la procédure.

ATEC & Eviva : performance et précision pour améliorer l'expérience patient et maximiser l'efficacité clinique.



Marqueurs biopsie

Les marqueurs de biopsie mammaire TriMark, Tumark et SecurMark d'Hologic sont conçus pour assurer un marquage précis, fiable et durable du site de biopsie.

Déployés facilement après le prélèvement, ces clips offrent une excellente visibilité en imagerie (mammographie, échographie, IRM) et une stabilité optimale dans le temps, facilitant le suivi, la planification chirurgicale et la prise en charge personnalisée des patientes.

TriMark, Tumark et SecurMark : précision du marquage, confiance du diagnostic, continuité des soins.



Horizon Series
Ci/C/Wi/W



L'ostéodensitomètre Horizon d'Hologic est un système multiplateformes permettant aux cliniciens d'évaluer la santé osseuse, la composition corporelle et les risques cardiovasculaires de leurs patients.

La technologie numérique du capteur céramique associée au système de calibration dynamique interne vous assurent une reproductibilité des mesures sur le long terme.

Un mode imagerie en 18 secondes est disponible pour la détection des fractures vertébrales, des calcifications aortiques ou bien la détection des fractures atypiques du fémur.

Ce système est disponible en version 64 ou 128 détecteurs, avec un plateau flottant motorisé et un poids patient admissible de 226 kg.




Horizon A
Bras rotatif

Reprenant la technologie et les modes d'examens de la série C et W, l'Horizon A, avec ses 216 détecteurs numériques et son bras rotatif motorisé, élargit les capacités d'examens aux personnes à mobilité réduite tout en réduisant les temps d'acquisition.

La table à hauteur variable et le panneau de commandes escamotable rendent possible l'accès aux brancards.

Ce système intègre en option le logiciel TBS de mesure de la qualité osseuse.

Le plateau flottant est motorisé, avec un poids patient admissible de 226 kg sur tous nos modèles DXA Horizon.

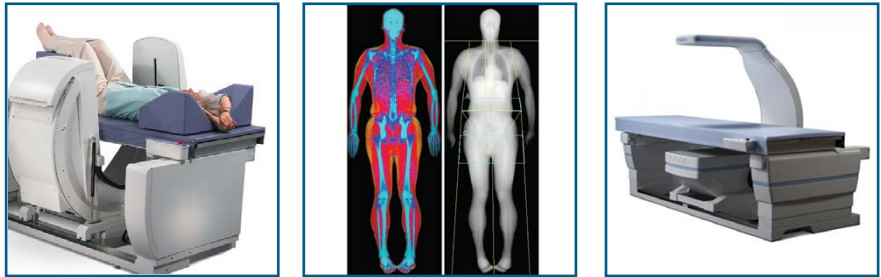

— DENTAIRE / CONE BEAM —



Une gamme complète de solutions en imagerie dentaire.

Du panoramique numérique simple, au système plus complet permettant des examens télécrâne et cone beam 3D, ou bien encore un système d'imagerie 3D dédié aux extrémités avec la possibilité d'examen en charge : vous trouverez le système qui répond à vos besoins cliniques.

PLANMECA



Planmeca VISO

L'excellence du cone beam accessible à tous, propulsé par l'IA. Planmeca VISO™ G1 est le dernier-né de notre gamme de systèmes panoramiques cone beam nouvelle génération. Plus économique que le Planmeca VISO™ G3, il a été spécialement conçu pour répondre aux exigences de l'imagerie dentaire grâce à un champ d'exploration optimisé, sans compromis sur la qualité. Pour les besoins d'imagerie grand champ, les Planmeca VISO™ G5 et G7 offrent une expérience cone beam de pointe avec leur volumétrie face ou crâne entier, répondant aux applications cliniques les plus complexes. Incluant les fonctions 2D panoramique, et télécrâne one shot en option.

- Planmeca VISO™ G7 : de Ø 3 x 3 à Ø 30 x 30 cm
- Planmeca VISO™ G5 : de Ø 3 x 3 à Ø 20 x 17 cm
- Planmeca VISO™ G3 : de Ø 3 x 3 à Ø 20 x 10 cm
- Planmeca VISO™ G1 : de Ø 3 x 3 à Ø 11 x 11 cm



Imagerie dentaire Romexis® 7

Intelligence artificielle intégrée avec Romexis® 7

Toute la gamme Planmeca VISO™ repose sur la nouvelle plateforme logicielle Romexis® 7 propulsé par l'IA, intégrant de série des fonctionnalités basées sur l'IA. L'IA intégrée au logiciel agit comme un assistant intelligent, prenant en charge automatiquement les tâches chronophages et ouvrant de nouvelles perspectives pour la planification des traitements dentaires. Elle permet de réduire le nombre de clics, simplifie l'utilisation du logiciel, allège les tâches routinières et diminue le temps passé devant l'ordinateur, libérant ainsi du temps pour ce qui compte vraiment : les soins aux patients.

Grâce à la fonctionnalité 3D Smart Anatomy, le système détecte et segmente automatiquement les structures anatomiques avec détection des voies respiratoires. La localisation automatique du canal mandibulaire et la numérotation dentaire se font en quelques secondes



ProMax 2D

Panoramique dentaire numérique avec télécrâne optionnel. Réalisation de clichés numériques de panoramiques adultes/ enfants, panoramiques fractionnés, ATM et Sinus (postérieur, latéral, médian-sagittal). Céphalostat crâne entier 27 cm x 30 cm optionnel avec son capteur dédié ou amovible. Entrée latérale adaptée aux personnes à mobilité réduite. Tablette de commande tactile couleur. Evolutif cone beam.



ProOne

Panoramique dentaire numérique avec station informatique. Réalisation de clichés numériques de panoramiques adultes/ enfants, panoramiques fractionnés, ATM et Sinus (postérieur, latéral, médian-sagittal). Entrée latérale adaptée aux personnes à mobilité réduite. Vue intégrale du positionnement patient avec triple faisceau laser de positionnement. Panneau de commande tactile couleur.



Verity



Système cone beam dédié à l'imagerie 3D :

- des extrémités en position assise, debout ou couchée.
- dentaire en position assise.

Membre supérieur : tête, coude, bras, poignet, main, doigt.

Membre inférieur : genou, jambe, cheville, pied, orteil.


En charge : genou, cheville, pied.

Arceau auto-positionné et mobile, permettant de s'adapter aux patients.

Son écran tactile couleur regroupe les fonctions allant de l'acquisition au traitement des images.



— ARCEAUX CHIRURGICAUX —

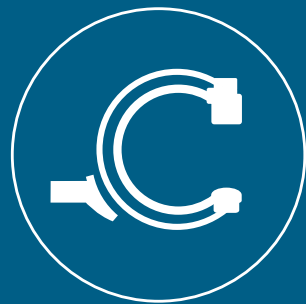


Parce que l'imagerie au bloc opératoire est exigeante et nécessite des produits à faible encombrement, rapide et simple d'utilisation, STEPHANIX vous propose sa gamme d'arceaux chirurgicaux. En tant que spécialiste de l'image radiologique, nous avons pensé à plusieurs solutions à capteur plan pouvant vous accompagner de la chirurgie des extrémités à une chirurgie plus lourde.

Omniscop DReam-S



Cet arceau mobile de fluoroscopie «tout-en-un» à capteur plan dispose d'un encombrement réduit. Omniscop DReam-S est constitué d'un bras en C, d'un tube, d'un générateur, d'une console opérateur et d'une station de travail tactile. Ce système optimisé sur une seule unité sera adapté pour vos chirurgies des extrémités mais aussi pour les chirurgies plus lourdes grâce à sa puissance générateur de 5 kW. La profondeur du bras en C de 108 cm minimum vous assure une accessibilité maximale. Son interface tactile dispose d'une ergonomie adaptée aux besoins des utilisateurs au bloc opératoire. Un emplacement est dédié pour installer une imprimante A6 sur la station de travail (en option). Capteur 21 x 21 cm ou 30 x 30 cm, avec en option un trotteur wifi équipé d'un deuxième écran diagnostic.

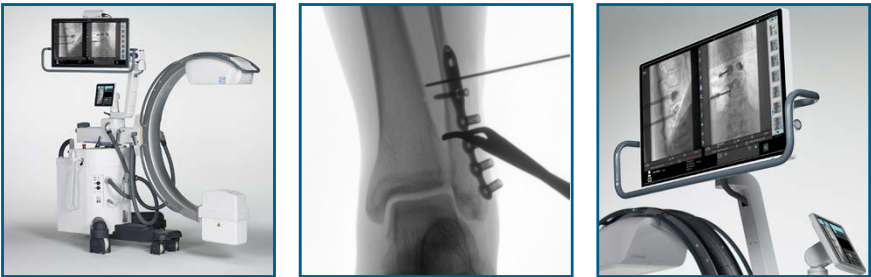

Omniscop DReam

Cet arceau mobile de fluoroscopie à capteur plan est composé d'un arceau et d'un chariot pour la station de travail. L'arceau dispose d'un capteur plan de dernière génération, disponible en version 21 x 21 cm ou 30 x 30 cm. Omniscop DReam vous assistera dans une diversité de procédures chirurgicales grâce aux différentes puissances générateurs de 5, 20 ou 25 kW. Des outils vasculaires sont disponibles en option. Sa grille, extractible manuellement, répondra à vos besoins d'utilisation pédiatrique. Un emplacement est dédié pour l'installation d'une imprimante A4/A6 sur la station de travail (en option). Nouveau capteur IGZO pour une imagerie plus fine.



Omniscop DReam-S Efficiency



Idéal pour la chirurgie orthopédique. Omniscop DReam-S Efficiency est un arceau chirurgical compact équipé d'une technologie capteur plan 21 x 21 cm, offrant une qualité d'image à faible dose. Accès facilité aux extrémités et articulations grâce à une profondeur du bras en C de 108 cm permettant de travailler sans contrainte, même sur membres inférieurs et supérieurs. Puissance générateur de 4 kW, garantissant des images nettes pour les procédures précises telles que les infiltrations, ostéosynthèses ou interventions sur petits os et articulations. Compact et maniable, il s'intègre facilement dans le bloc opératoire tout en offrant flexibilité et sécurité pour les chirurgiens. L'arceau peut être équipé d'un trotteur avec écran filaire (option).



— IT —




Nous vous proposons une gamme de consoles de diagnostic pour vos besoins spécifiques, mammographie, radiologie, multimodalités, incluant nos solutions d'archivage sécurisé de 1 à 18 To.

Les solutions d'IA INCEPTO sont disponibles pour l'ensemble de vos besoins en radiologie, y compris en mammographie.



INCEPTO - Intelligence artificielle

Au-delà des solutions logicielles, ce qui importe, c'est avant tout mettre en avant notre expertise et l'accompagnement dans la mise en place, la formation et l'utilisation de nos solutions. C'est leur intégration dans votre pratique quotidienne et vos schémas de lecture qui font de nos solutions de véritables aides avec un minimum d'interactions et des informations pertinentes dans un format simple à intégrer. Nos équipes d'experts en IA, par type d'application, sauront vous accompagner depuis vos besoins exprimés jusqu'à l'utilisation en routine clinique.

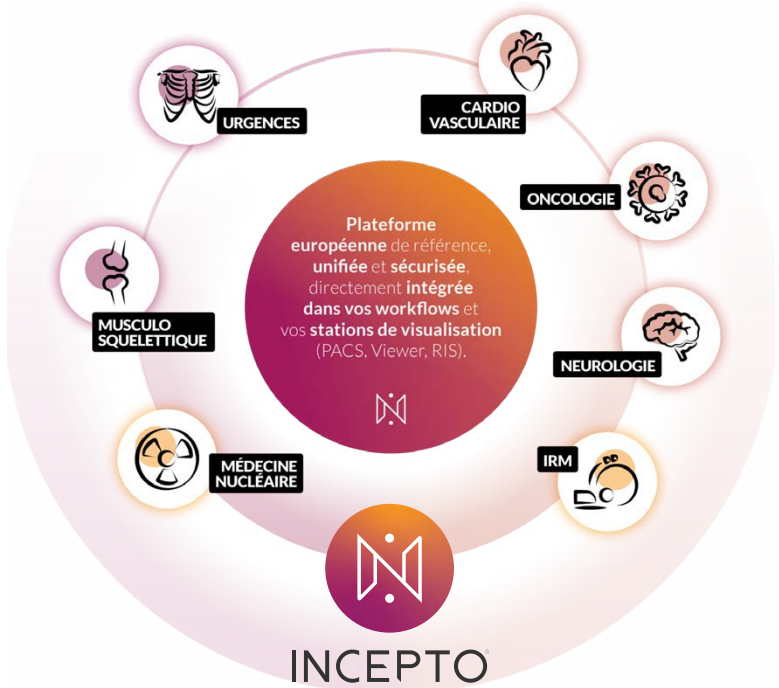

THALES TrustFleet

TrustFleet : sécurisez et fiabilisez vos équipements de radiologie.

Imaginé par Thales et déployé par Stephanix sur ses tables télécommandées D²RS, TrustFleet est la plateforme cloud de télésurveillance et de maintenance à distance, dédiée à vos tables télécommandées D²RS Stephanix.

Dans un secteur où chaque heure d'immobilisation pèse sur la prise en charge patient et où les cyberattaques se multiplient, TrustFleet apporte une réponse complète : connectivité sécurisée en temps réel, contrôle à distance (RDP/VNC), analytics d'usage et cybersécurité de niveau Thales.

Deux offres au choix :

- connect: l'essentiel pour démarrer
- premium : la surveillance proactive.

Les bénéfices : diagnostic en quelques minutes au lieu de plusieurs heures sur site, réduction des déplacements techniciens, maintenance prédictive, et infrastructure certifiée adossée à l'expertise cyber Thales (3 000 experts, SOC 24/7).

SecurView™ DX




SecurView™ est une console de diagnostic proposant un clavier dédié pour la mammographie. Sa philosophie de lecture en 1 clic, associée à de nombreux protocoles de lecture, répond aux besoins variés des utilisateurs. Elle gère les images de Tomosynthèse, les images multimodalités*, et propose un ensemble d'outils logiciels d'analyse et de quantification comme le CAD 2D/3D, la densité mammaire 2D/3D (Quantra). Sa fonction Auto-Fetching permet une récupération automatique des examens antérieurs. L'export des images s'effectue en 1 clic. La console SecurView supporte les résultats des logiciels d'I.A grâce aux marqueurs CAD SR.



MedMammo

MedMammo est une console de diagnostic multimodalités gérant entre autres les images de Tomosynthèse. Des outils de navigation spécifiques, de MIP, export de coupe existent pour la tomosynthèse. Un clavier dédié, associé à de nombreux protocoles de lecture, répond aux besoins variés des utilisateurs. Un ensemble étendu de mesures pour la radiologie est disponible y compris le mode stitching*. Sa fonction Auto-Fetching permet une récupération automatique des examens antérieurs. L'export des images s'effectue en 1 clic. La console MedMammo supporte les résultats des logiciels d'I.A grâce aux marqueurs CAD SR*

* en option

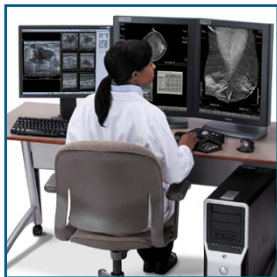


MedArchive

Solution permettant d'archiver de façon sécurisée sur différents supports sans avoir recours à un PACS, MedArchive est la solution multimodalités en Dicom.

Les + MedArchive :


- Conforme au standard Dicom, respecte les profils IHE et reçoit les messages HL7.
- Distribution automatique des images sur les consoles de travail.
- Compression possible des images Dicom (avec ou sans perte) et conversion en JPEG ou JPEG 2000.
- Archivage avec technologie RAID 5/6.
- Une gestion HSM permet de gérer l'espace disque en fonction de l'ancienneté des images.

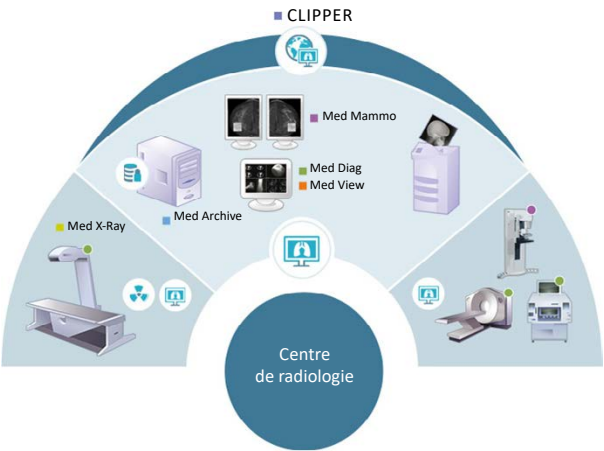

Clipper

Clipper: Solutions de partage d'examens.

Avec Clipper, fidéliser vos prescripteurs en leur offrant une solution simple et sécurisée, depuis un navigateur internet, leur permettant de consulter rapidement les images et compte rendu de leurs patientes. Le prescripteur reçoit une notification dès que l'examen et son compte rendu sont disponibles. C'est pour le site un outil de supervision et de communication interprofessionnel. Clipper est aussi une vraie solution de diffusion interne/externe permettant d'assurer une gestion multi-sites et qui peut s'adosser à la solution MedArchive.

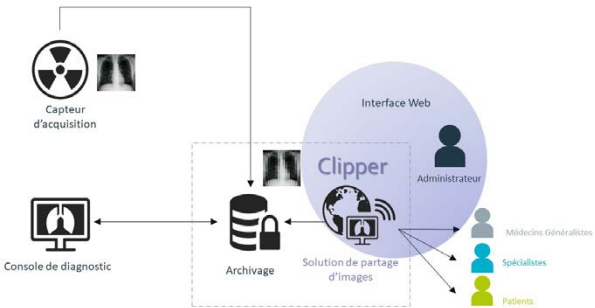

Ces produits sont des dispositifs médicaux de classe IIb. Ils sont destinés à la réalisation d’actes d’imagerie médicale. Les actes effectués avec ces systèmes peuvent être pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations (et sous conditions). Veuillez lire attentivement les instructions figurant dans les manuels d’utilisation ou sur les étiquetages. Dispositifs médicaux fabriqués par STEPHANIX / CE 1639 / SGS BELGIUM. Dispositifs médicaux fabriqués par RADIOLOGIA / CE 1639 / SGS BELGIUM. Dispositifs médicaux fabriqués par HOLOGIC / CE 2797 / TUV NORD. Dispositifs médicaux fabriqués par PLANMECA / CE 0598 / SGS Fimko. Dispositifs médicaux fabriqués par PLANMED / CE 0598 / SGS Fimko. Dispositifs médicaux fabriqués par ATS / CE 0051 / IMQ. Dispositifs médicaux fabriqués par MEDECOM / CE 1639 / SGS BELGIUM.

Date de révision : 2026.08 - Catalogue STEPHANIX.

STEPHANIX se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ces produits en fonction de l’évolution perpétuelle des technologies. Photographies non contractuelles.



www.stephanix.com

STEPHANIX - 10 rue Jean Moulin - Z.I du Bayon - 42 150 La Ricamarie - FRANCE
Tel : + 33 (0)4 77 47 81 60 - contact@stephanix.com - www.stephanix.com